

Kolmerattalised jalgrattad 2217E, 2219E on mudeli 2217, 2219 versioonid, mis on varustatud elektrilise pedaalimisabiga.

1. Tehnilised andmed

Kirjeldus	Mõõtmed
Aku	9 Ah
Süsteem	36 V
Mass koos akuga	2,4 kg
Kasutustemperatuur	0 °C...45 °C (standardne laadimine) -20 °C...60 °C (standardne tühjenemine)
Hoiustamistemperatuur	-20 °C...50 °C (1 nädal) -20 °C...40 °C (6 kuud) -20 °C...35 °C (1 aasta)
Akulaadur	Lugege akulaaduri kasutusjuhendit
Mootor	250 W, 190 p/min
Abi kuni	17 km/h
Abi tase	0 + 6 (0 = abi ei ole saadaval, teistel tasemetel on abi saadaval)
Sõiduulatus	Oleneb paljudest teguritest*
Pidurikatkesti	Pidurdamine: abi katkestatakse
Standardne	Tarnitakse ketaspidurite, 3 või 7 käigu ja diferentsiaaliga

* Sõiduulatust mõjutavad tegurid

Aku laetustase, kasutatud abi tase, temperatuur, tuul, kasutaja kaal ja korvi koormus, rehvirõhk ja rehvide seisund, kasutatud käikude kiirendused, veoketi seisund, tee seisund, kallakud.

2. Ohutuseeskirjad


- ⚠ **Volitamata hooldus või tehniline hooldamine või heaks kiitmata varuosad võivad põhjustada tõsiseid kahjustusi ja tühistada garantii.**
- ⚠ **Järgige kõiki kohaldatavaid seadusi ja eeskirju.**
- ⚠ **Harjutage sõitmist ohutus kohas.**
- ⚠ **Kasutage ainult ettevõtte Vermeiren tarnitud akusid ja laadureid. Ärge kasutage laadurit muude akude laadimiseks.**
- ⚠ **Ärge pillake akut ega laadurit maha. Ärge avage ega muutke akut või laadurit.**
- ⚠ **Vältige kokkupuudet akuhappega.**
- ⚠ **Hoidke aku eemal tugevast päikesevalgusest ja kuumusest. Lühise vältimiseks ärge kasutage aku lähedal metallsemeid (nt kirjaklambrid, mündid, naelad).**
- ⚠ **Enne kolmerattalise jalgratta autos transportimist eemaldage aku jalgrattast.**
- ⚠ **Kasutage elektroonikat ainult kuivas ruumis.**
- ⚠ **Tagage akuruumi hea ventilatsioon. Ärge katke laadurit laadimise ajal kinni.**
- ⚠ **Kui aku on täis laetud, ühendage aku laaduri küljest lahti.**
- ⚠ **Ühendage laadur alati seinapesast lahti, kui akut ei laeta.**

3. Kavandatud kasutus

Elektrilist kolmerattalist jalgrattast võib kasutada sillutatud teedel ja tasastel kruusateedel.

See ei ole ette nähtud kasutamiseks maastikul ega mägirattana, hüppamiseks ega võidusõiduks.

4. Aku paigaldamine ja eemaldamine

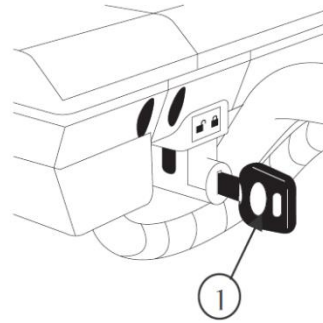

Avatud

Lukustatud




Aku paigaldamiseks toimige järgmiselt.

1. Sisestage võti ① ja pöörake avatud oleku sümboli asendisse.
2. Pange aku nii sügavale akuruumi kui võimalik. Akut on võimalik sisestada vaid ühel viisil.
3. Pöörake võti ① lukustatud oleku sümboli asendisse.
4. Veenduge, et aku oleks korralikult kinnitatud.
5. Eemaldage võti ① (ärge kunagi eemaldage võtit sõitmise ajal).

Aku eemaldamiseks toimige järgmiselt.

1. Sisestage võti ①.
2. Pöörake võti ① avatud oleku sümboli asendisse.
3. Tõmmake aku ettevaatlikult akuruumist välja.

5. Elektriseadme sisse- ja väljalülitamine

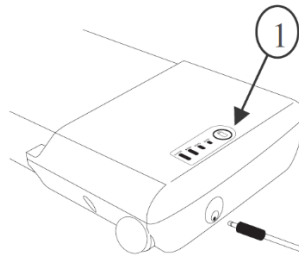


1. Elektriseadme sisse- ja väljalülitamiseks vajutage 2 sekundit akunäidiku nuppu ① akul.
2. Juhtpaneeli LED-id näitavad olekut.

6. Aku laetustaseme näidik


On kaks aku laetustaseme näidikut.

* Akupakil (korvi all kolmerattalise jalgratta tagaküljel)

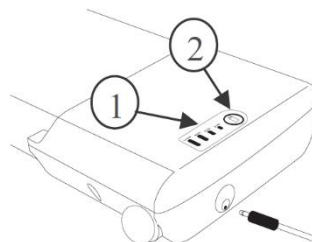

1. Vajutage akupakil olevat nuppu ②.
2. Aku laetustaseme näidiku LED-id ① näitavad aku laetustaset.

* Juhtpaneel (lenkstangidel kolmerattalise jalgratta esiküljel)

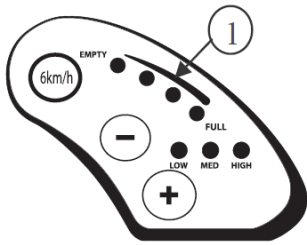

Kui elektrisüsteem on sisse lülitatud, näitavad aku laetustaseme näidiku LED-id ① aku laetustaset.


Juhtmestuse tõttu võivad kahe näidiku näidud olla veidi erinevad. Sellisel juhul lugege õigeks väiksem laetustaseme näit.

7. Akude laadimine

⚠ HOIATUS! Vigastuste oht. Kasutage akude laadimiseks ainult kaasasolevat akulaadurit.

Enne esmakordset laadimist kontrollige akut kahjustuste suhtes. Vajutage aku sisselülitamiseks 2 sekundit laetustaseme näidiku nuppu. Kui ükski laetustaseme näidiku LED ei sütti, võib aku olla kahjustatud. Kui süttib vähemalt üks laetustaseme näidiku LED-idest, aga mitte kõik, laadige aku enne esmakordset kasutamist täielikult täis.

Ärge laadige kahjustatud akut ega kasutage seda, vaid võtke ühendust spetsialistist edasimüüjaga.

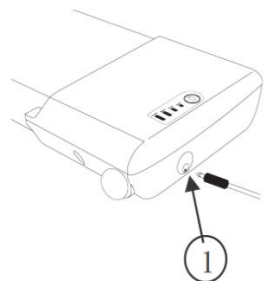

Enne esmakordset kasutamist laadige aku täielikult täis, et tagada aku täismahutavus.

Akut võib laadida igal ajal nii kolmerattalises jalgrattal kui ka sellest eemal.

Eemaldatud aku laadimise juhised

1. Lülitage aku/elektriseade välja.
2. Eemaldage aku akuruumist ja vältige mustuse või vedelike sattumist laadimispeessa.
3. Ühendage laaduri pistik akupakiga ①.
4. Ühendage laaduri toitejuhe seinapesa.
5. Akulaaduri LED-näidikud näitavad laadimisprotsessi olekut.
Punane – laadimine
Roheline – ooterežiim / täis laetud
6. Kui aku on täis laetud, eemaldage akulaadur seinapesast ja aku küljest.

Lugege akulaaduri kasutusjuhiseid koos akulaaduriga saadud kasutusjuhendist.


8. Sõitmine

Enne kolmerattalise jalgratta kasutamist potentsiaalselt ohtlikes kohtades või tiheda liiklusega teedel õppige kolmerattalist jalgratast tundma. Harjutage sõitmist avaral avatud alal, näiteks pargis. Proovige erinevaid abi tasemeid. Kui abisüsteem on SISSE lülitatud, rakendub elektrisüsteem ja annab abi ainult pedaalimise ajal. Võimsus sõltub pedaalimisjõust ja abi tasemest. Kui lõpetate pedaalimise või saavutate kiiruse üle 17 km/h, lülitatakse abi automaatselt välja. Kui abi välja lülitatakse (abi tase 0), võite kolmerattalise jalgrattaga tavapärasel viisil sõita.

Abisüsteemi saab aktiveerida lenkstangidel oleva juhtpaneeli nupuga „+“. Abi taset saab suurendada/vähendada lenkstangidel oleva juhtpaneeli nuppudega „-“ ja „+“.

Saadaval on 7 abi taset.

Abi tase	LED
0	Ükski LED ei põle
1	LED „LOW“ vilgub
2	LED „LOW“ põleb
3	LED „MED“ vilgub
4	LED „MED“ põleb
5	LED „HIGH“ vilgub
6	LED „HIGH“ põleb

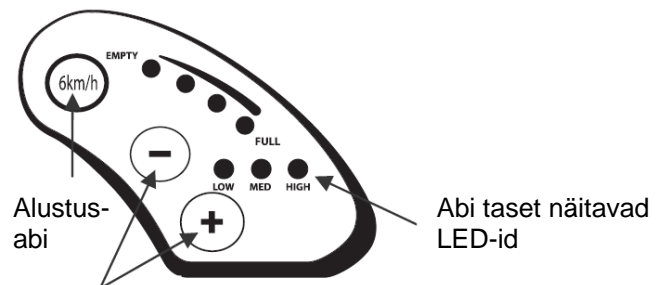

Alustusabi
Abi taseme muutmise

Abi taset näitavad LED-id

9. Alustusabi sisse- ja väljalülitamine

Alustusabi saab aktiveerida nupuga „6km/h“. Alustusabi on piiratud kiirusega 6 km/h. Alustusabi võib hõlbustada kolmerattalise jalgratta lükkamist või liikumahakkamist. See on kasulik ka järskudel pööretel.

10. Võtmed

Elektriline kolmerattaline jalgratas tarnitakse kahe võtmega: põhivõti ja varuvõti. Need on tähistatud seerianumbriga. Hoidke varuvõtit kindlas kohas ja kirjutage võtme seerianumber võtme asendamise jaoks üles.

11. Hooldamine

Kolmerattaliste jalgrataste hooldusjuhendi leiate ettevõtte Vermeiren veebisaidilt www.vermeiren.com.