

Ohutusnõuanded patsientidele

1. Üldised nõuanded

• Paluge, et Teie varustaja või haiglapersonal tutvustaks Teile, kuidas küünarkarku kasutada!

• Et asend oleks ergonoomiliselt õige, pöörduge palun oma varustaja või haiglapersonali poole.

• Palun jälgige, et Te kasutaksite küünarkarku vastavalt ettekirjutistele. Küsimuste korral pöörduge palun oma varustaja poole.

• Palun kontrollige enne iga kasutamist oma küünarkargul järgmisi detaile:

- Nupu reguleerimisel (pilt „A”) peab nupp korralikult august välja ulatuma!
- Klambri reguleerimisel peab plastikklamber olema korralikult sisse pandud!


- Kõik kruvid peavad olema korralikult kinni keeratud!

- Kummiotsik ei tohi olla väga kulunud! Kui on näha tugevaid kulumisilminguid, pöörduge palun oma varustaja või haiglapersonali poole.

- Silmaga nähtavate kahjustuste korral ei tohi küünarkarku mingil juhul edasi kasutada. Sellisel juhul pöörduge palun oma varustaja või haiglapersonali poole.

• Olge palun eriti ettevaatlikud, kui maapind on märg või jäätunud. Ka niisketel plaatidel võib libastuda!

• Küünarkark tuleb käimisel asetada niivõrd vertikaalselt kui võimalik (pilt „B” <õige>)! Seetõttu ärge pange küünarkarku kunagi kehast liiga kaugemale (pilt „B” <vale>), sest Te võite muidu kukkuda!

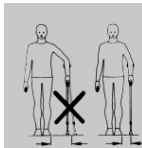

• Palun hoidke küünarkarku kasutades käepidemest käega täielikult ja tugevasti kinni!

• Kui Te siiski peaksite kukkuma, siis laske küünarkargul külje suunas kukkuda, et Te ei kukuks selle peale.


• Võimaluse korral paluge, et spetsialistid tutvustaksid Teile, kuidas treppidel kasutada küünarkarku!

• Võimaluse korral paluge, et keegi Teid saadaks ja toetaks, et ta saaks Teid kukkumise korral kinni püüda.

• Treppidel hoidke küünarkarku kasutades (pilt „C”) kindlasti vaba käega kinni käsipuust!




• Kui Te kasutate treppi kahte küünarkarku (pilt „D”), siis võtke mõlemad kargud ühte kätte ja hoidke tingimata vaba käega käsipuust kinni!

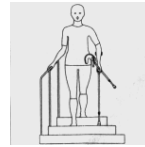

HOIATUS!


Trepid ilma käsipuuta peidavad endas suuremat ohtu ja neil tuleb olla väga ettevaatlik!

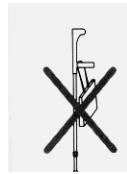

• Küünarkarkudele on keelatud suurte ja väikeste kottide või muude esemete (pilt „E”) riputamine!

• Küünarkargud on keelatud kasutada valedele eesmärkidel, nagu näiteks

mööbli tõstmiseks või ümber paigutamiseks (pilt „F”)!

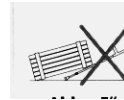

• Mehhaanilised muudatused küünarkarkudel on keelatud, kuna sellisel juhul ei saa me enam garanteerida turvalisust. Samal põhjusel tohib kasutada ainult originaalvaruosi ja originaallisaosi!

• Kui Te ei kasuta küünarkarku pikema aja jooksul, siis tuleb see päikesekiirguse eest ära panna!

• Kui Te ei ole küünarkarku pikemat aega kasutanud, siis peab spetsialist selle enne järjekordset kasutamist üle kontrollima!

Kowsky küünarkarkude jaoks on olemas originaalvaruosad ja lisaosad. Varuosade, lisaosade saamiseks ja parandustöödeks pöörduge palun spetsialisti poole!

Katkised ja vanad küünarkargud ei kuulu majapidamisjätmete hulka. Palun uurige järgi, kuhu ja kuidas Te saate need ära viia.

2. Nõuanded kokkupandavate keppide korral

• Palun kontrollige enne iga kasutuskorda, et toruosad sobiksid üksteise sisse. Kui need ei peaks koos püsima, pöörduge palun oma varustaja poole.

• Kokkupandav kepp on pinges all! Üksikuid toruosi hoiab koos toru sees olev kummipael. Kepi kokkupanemisel võib tekkida tõmbejõud ja pinget.

3. Kasutamine

Küünarkarkude kasutamine võib olla väga erinev ja see sõltub sellest, kuidas need on inimese

inimisele: küünarkarkude kasutamise tõhusust Teid spetsialist!

4. Jää ja lumi

Vältige lumist või jäist maapinda, kui Teie küünarkarg pole meie talvevarustust (jääteravikud).


5. Kui midagi on korrast ära

Kui Teie küünarkargul on midagi lahti tulnu lödvenenud või paigast nihkunud, pöörduge palun oma varustaja või haiglapersonali poole. Väliselt nähtava vigastuste korral ei tohi küünarkarku mingil juhul edasi kasutada, kuna sellisel juhul ei ole enam nõutav stabiilsust!

6. Puhastamine

HOIATUS!

Ärge puhastage käepidet ega kummiotsikut kunagi õlidega (pilt „G”)! Libisemisoht! Kui küünarkark on määrdunud, võite seda puhastada pehmete puhastusvahendite ja pehme lapiga.

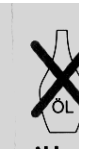

Nõuanne:

Kui vajalik peaks olema desinfektsioon, kasutage sobilikku vahendit „TERRALIN”:

Firma Schülke & Mayr GmbH

22840 Norderstedt


Kasutamisel järgige palun tootjapoolseid andmeid!

7. Küünarkarkude reguleerimine

HOIATUS!

Küünarkarke tohivad reguleerida ainult spetsialisti. Valesti reguleeritud küünarkargud võivad vähendada nende funktsiooni või need võivad põhjustada patsiendil ülekoormust!

Küünarkargud, mis Teile antakse, vastavad nõuetele need reguleeritakse varustaja või haiglapersonali poolt vastavalt Teie pikkusele. Kui Te ei ole kindel, et see on õige, pöörduge palun vastava spetsialisti poole, kes annab Teile nõu!

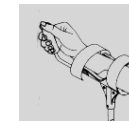

Artriidihaigetele mõeldud küünarkarkude reguleerimine:

Palun jälgige, et takjapael (pilt „H”) suruks väga tugevasti Teie käsivarrele!

Fabrikation orthopädischer Hilfsmittel
Erwin Kowsky GmbH & Co. KG
Oderstraße 73
D-24539 Neumünster

Telefon: 04321 9957 0
Faks: 04321 9957 57
e-mail: info@kowsky.de
www.kowsky.de

Maaletooja: Invaru OÜ

KÜÜNARKARK



Kowsky

Kowsky küünarkargud on I klassi meditsiiniseadmed ja need vastavad EÜ direktiivi 93/42/EMÜ vastavatele määrustele.

Kowsky